



000/0020.011/30

Duoskin, waterafstotende huidfilm (10x6cm)

Duoskin is een gedeeltelijk doorlatende huidfilm.
Duoskin is dan ook uitermate geschikt als fixeer- en
afdekverband.



Eigenschappen


- Afmetingen: 10 x 6 cm.
- Transparante, soepele en ademende polyurethaanfilm.
- Ondoorlaatbaar voor water en bacteriën.
- Hypoallergeen.

Toepassingen

- Eenmalig gebruik.
- Fixeren van kompressen en zalven.
- De film enkel aanbrengen op intacte huid.

Gebruik

- Verwijder schutbladen 1 en 2 en breng de film aan op droge en propere huid.
- Zorg ervoor dat het kompres/de zalf volledig afgedekt is.
- Verwijder schutblad 3 en druk goed aan.

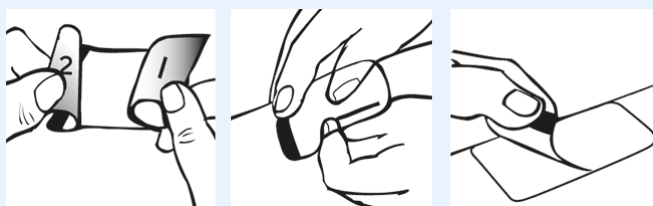

Inhoud

Doos 25 stuks

Bewaring

- Vervaldatum: 59 maanden na productiedatum.
- Bewaren op een koele, droge en donkere plaats, tussen 10 en 25°C.
Dit product is een klasse I medisch hulpmiddel. CE approved.

Versie: 01/05/2024